



RC4-2

**Brugsanvisning
RC4-2 fjernbetjening**

I denne brugsanvisning kan fjernbetjeningen og andre dele se anderledes ud end det, du har fået udleveret. Ret til ændringer forbeholdes.



Høreapparater og tilbehør må ikke bortskaffes med det almindelige husholdningsaffald. Venligst kontakt høreklinikken angående bortskaffelse af høreapparat og tilbehør.

Indhold

Ny fjernbetjening	4
Batteriinformation	9
Batteritype	9
Isætning af batterier	10
Udskiftning af batterier	10
Tænd og sluk	11
Lydstyrke	14
Justering af lydstyrken	14
Lydløs	19
Lytteprogrammer	23
Zen+-program	26
Særlige situationer	32
Hændelseslog	37
Alarm	38
Vedligeholdelse af RC4-2	40
Gode råd	42
Hvis fjernbetjeningen ikke virker	43
Ekstraudstyr	44
Regulatorisk overensstemmelse	46
Symboler	48

Ny fjernbetjening

Vi håber, du bliver tilfreds med din nye fjernbetjening til Widex høreapparater. Denne brugsanvisning beskriver, hvordan fjernbetjeningen anvendes. For at få det optimale udbytte anbefaler vi, at du læser hele brugsanvisningen.


Fjernbetjeningen giver nem adgang til høreapparatfunktioner, hvis man selv har vanskeligt ved at betjene knapperne på bag-øret- og i-øret-høreapparater, eller hvis andre (ægtefælle/partner, pædagoger og plejere) er ansvarlige for betjening af høreapparatet.

Fjernbetjeningen forprogrammeres under høreapparattilpasningen, så den kan fungere optimalt i forskellige situationer.

Fjernbetjeningen er et hjælpemiddel til høreapparatet. Høreapparatet kan sagtens betjenes uden fjernbetjening. Fjernbetjeningen er blot en anden måde at betjene høreapparatet på. Fordelene ved en Widex fjernbetjening er:

- Knapperne på fjernbetjeningen kan ses i modsætning til knapperne på høreapparatet, som ikke ses, når det sidder i/på øret.
- De større knapper på fjernbetjeningen er nemmere at betjene end de små knapper på høreapparatet.
- Høreapparatet kan betjenes på en diskret måde f.eks. fra en lomme eller en taske.
- Lydstyrken kan justeres, og der kan vælges høreapparatprogrammer uden brug af volumenknop og programknapper.
- Højre og venstre høreapparat kan betjenes separat.

Fjernbetjeningen er en lille computer, der indeholder data til de forskellige høreapparatindstillinger. Den indeholder også en radiosender, der sender beskeder til høreapparatet. Det er ikke nødvendigt, at fjernbetjeningen og høreapparatet kan "se" hinanden. Senderækkevidden er ca. 1 meter.

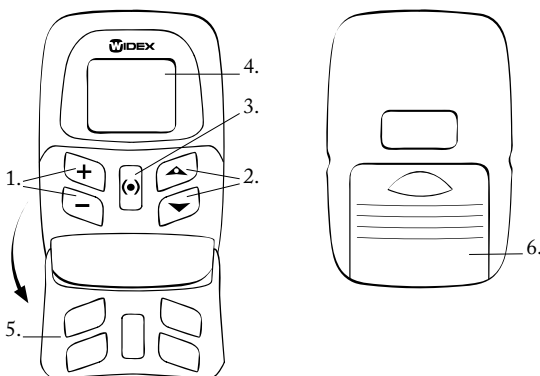

-
1. **Volumenkontrol.** Juster lydstyrken ved hjælp af tasterne [+] og [-].
 2. **Programvælger.** Vælg program ved hjælp af tasterne [▲] og [▼]. RC4-2 fjernbetjeningen kan maksimalt betjene fem programmer og Zen+-programmet.
 3. **Tænd/sluk-funktion.** Tænd for fjernbetjeningen ved hjælp af tasten [(●)]. Tasten [(●)] stiller også fjernbetjeningen i sin oprindelige indstilling, P1 V9, eller skifter mellem R (højre høreapparat) og L (venstre høreapparat), hvis du har to høreapparater.
 4. **Display.** Displayet viser program [P], lydstyrke [V], batteriniveau, alarm og højre/venstre (R/L). Tallene i venstre side af displayet viser indstillingerne for venstre høreapparat, og tallene i højre side af displayet viser indstillingerne for højre høreapparat.

5. **Transparent beskyttelsesklap** med huller til tasterne. Med beskyttelsesklappen lukket mindskes risikoen for tilfældige tastetryk. Beskyttelsesklappen kan slås ud, hvilket gør fjernbetjeningen lidt længere og dermed nemmere at holde på. Tasterne bliver ligeledes lidt højere og dermed nemmere at mærke.

6. **Batterilåg**

Batteriinformation

Batteritype

Den anbefalede batteritype til RC4-2 fjernbetjeningen er:


Lithium CR 2032

Til RC4-2 skal benyttes to CR 2032 batterier.

På høreklubben kan du få oplysninger om anskaffelse af batterier. Bemærk, at der på emballagen findes en datomarkering, som angiver, hvor længe batterierne kan holde, og anbefalinger om, hvordan batterierne skal kasseres efter brug. Batteriets holdbarhed afhænger af, hvor meget fjernbetjeningen bruges.

Isætning af batterier

Placer batterierne i batteriskuffen til RC4-2, så siden med plustegnet (+) vender opad.

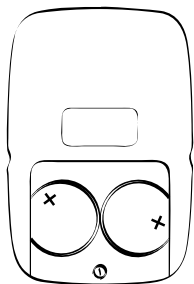

Udskiftning af batterier

Skift altid begge batterier på samme tid.




Når batteriet er ved at være brugt op, vises symbolet permanent i displayet. Hvis symbolet kun vises kortvarigt, er det ikke nødvendigt at skifte batterierne.

Tænd og sluk

RC4-2-fjernbetjeningen tændes ved at trykke på [(•)] tasten. Som standard slukker fjernbetjeningen automatisk efter 30 sekunder.

På høreklinikken kan du få hjælp til at vælge et andet tidsudløb.

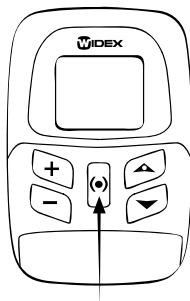


Når høreapparatet er tændt, bekræfter en talebesked eller en tone, at fjernbetjeningen er aktiv.

Høreapparatet er nu indstillet til samme program og samme lydstyrkeniveau, som sidste gang fjernbetjeningen blev anvendt.

Forklaring på fjernbetjeningens displaysymboler:

P	Program. Tallet efter P viser det valgte program.
V	Lydstyrke (niveau). Tallet efter V viser lydstyrkeniveauet fra 1 (minimum) til 13 (maksimum). Hvis 0 vises efter V, er lydstyrken slået helt fra, men høreapparatet er ikke slukket.
R	Højre
L	Venstre

Lydstyrke

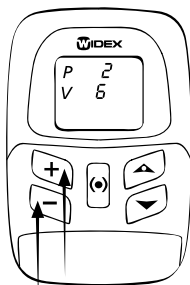

Justering af lydstyrken

Hver gang lydstyrken justeres, høres en biptone.


Juster lydstyrken op ved at trykke på [+] tasten.

Juster lydstyrken ned ved at trykke på [-] tasten.


Lydstyrkeniveauet vises på displayet. Tallet efter V viser lydstyrkeniveauet

- Maksimalt lydstyrkeniveau er 13.
- Minimalt lydstyrkeniveau er 1.
- 0 betyder, at lydstyrken er slået helt fra.

Justering af lydstyrken, hvis du kun har et høreapparat

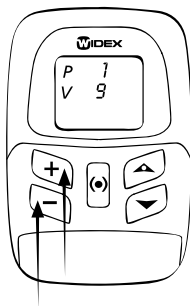

Tryk på [(•)] tasten. Displayet skal nu vise grundindstillingen P1 V9. Juster til den ønskede lydstyrke ved hjælp af [+] [-] tasterne. Fjernbetjeningen slukker automatisk efter ca. 30 sekunder.

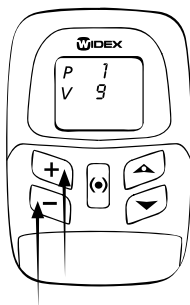


Justering af lydstyrken, hvis du har to høreapparater, som du vil indstille til samme niveau

Tryk på [(•)] tasten. Displayet skal nu vise grundindstillingen P1 V9. Juster til den ønskede lydstyrke ved hjælp af [+] [-] tasterne. Dit valg vil herefter gælde for begge høreapparater. Fjernbetjeningen slukker automatisk efter ca. 30 sekunder.


Justering af lydstyrken, hvis du har to høreapparater, som du vil indstille til forskellige niveauer

Du kan kun indstille høreapparaterne til to forskellige lydstyrkeniveauer, hvis fjernbetjeningen er programmeret med denne mulighed.

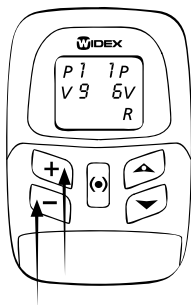

Tryk på [(•)] tasten. Displayet skal nu vise grundindstillingen P1 V9. Tryk igen på [(•)] tasten. To tal vises nu ud for V (lydstyrke), et for hvert høreapparat.

Bogstavet R vises i nederste højre hjørne og indikerer, at lydstyrken for højre høreapparat kan justeres ved hjælp af [+] [-] tasterne.

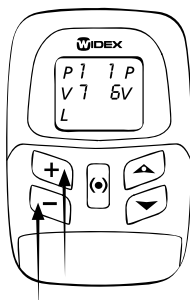


Tryk derefter én gang på [(•)] tasten for at justere venstre høreapparat. Bogstavet L vises i nederste venstre hjørne og indikerer, at lydstyrken for venstre høreapparat kan justeres ved hjælp af [+] [-] tasterne. Fjernbetjeningen slukker automatisk efter ca. 30 sekunder.

Lydløs


Du har også mulighed for helt at slukke lyden i høreapparatet ved hjælp af RC4-2.

Anvendelse af lydløsfunktionen, hvis du kun har et høreapparat

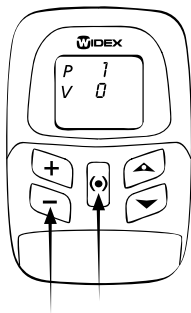

Tryk på [(•)] tasten. Displayet skal nu vise grundindstillingen P1 V9. Tryk derefter på [(•)] og hold den nede, mens du trykker på [-] tasten. Tallet 0 vises ud for V. For at justere lydstyrken op igen skal du trykke på [+] tasten. Det vil sætte lydstyrken tilbage i sin grundindstilling (9).


Anvendelse af lydløsfunktionen, hvis du har to høreapparater og ønsker at gøre begge lydløse

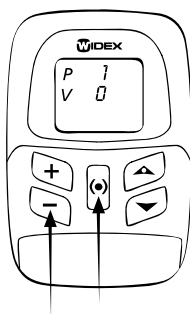


Tryk på [(•)] tasten. Displayet skal nu vise grundindstillingen P1 V9. Tryk derefter på [(•)] og hold den nede, mens du trykker på [-] tasten. Tallet 0 vises ud for V. Denne værdi gælder for begge høreapparater.

Anvendelse af lydløsfunktionen, hvis du har to høreapparater og kun ønsker at gøre det ene lydløst

Det er kun muligt at gøre blot ét høreapparat lydløst, hvis fjernbetjeningen er programmeret med denne mulighed.

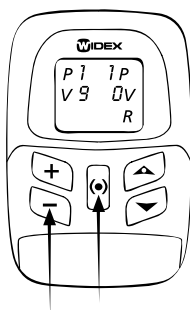


Tryk på [(•)] tasten. Displayet skal nu vise grundindstillingen P1 V9. Tryk igen på [(•)] tasten. To tal vises ud for V (lydstyrke), et for hvert høreapparat. Bogstavet R vises i nederste højre hjørne og indikerer, at nu kan højre høreapparat gøres lydløst. For at gøre dette skal du holde [(•)] tasten nede, mens du trykker på [-] tasten. Tallet 0 vises ud for V (lydstyrke) for højre høreapparat.

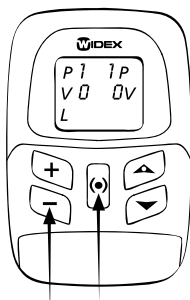

Tryk én gang på [(•)] tasten for at gøre venstre høreapparat lydløst. Bogstavet L vises i nederste venstre hjørne og indikerer, at nu kan venstre høreapparat gøres lydløst. Hold [(•)] tasten nede, mens du trykker på [-] tasten. Tallet 0 vises ud for V (lydstyrke) for venstre høreapparat. Fjernbetjeningen slukker automatisk efter ca. 30 sekunder.

Lytteprogrammer

Med RC4-2 fjernbetjeningen får du adgang til op til fem lytteprogrammer samt Zen+-programmet. Sammen med tilpasseren har du fundet ud af, hvilke programmer der er relevante for dig. Hvis dit behov senere ændrer sig, kan kombinationen af lytteprogrammer også ændres.

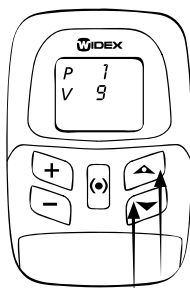

Du vælger mellem program 1-5 ved at trykke kortvarigt på [$\blacktriangle$] [$\blacktriangledown$] tasterne, indtil det ønskede program vises i displayet. Tallet efter P viser det valgte program.

Hver gang du skifter til et andet program, angiver en talebesked, hvilket program du har valgt. Hvis du i stedet for en talebesked har valgt en indstilling med toneindikationer, vil forskellige lyde angive, hvilket program du har valgt.

Program 1: En kort biplyd

Program 2: To korte biplyde

Program 3: Tre korte biplyde

Program 4: En lang og en kort biplyd

Program 5: En lang og to korte biplyde.

Zen+-program: Tone

Tilpasseren kan her angive de valgte programmer.

Program	Programnavn i høreapparatet	Kommentarer
1		
2		
3		
4		
5		

Zen+-program

Et langt tryk på [▲] tasten giver adgang til Zen+-programmet*. Ordet 'Zen' kan høres i høreapparatet, hvis talebeskedfunktionen er slået til. Hvis talebeskedfunktionen ikke er slået til, høres en tone.

Zen+-programmet giver mulighed for op til tre forskellige Zen-lydstile.


Du kan vælge mellem Zen-lydstil a, b og c ved at trykke på [▲] [▼], indtil den ønskede Zen-lydstil vises i displayet. Bogstavet P viser, hvilken lydstil der er valgt.

Hver gang der skiftes til en ny Zen-lydstil, høres ordet 'Zen' i høreapparatet (hvis talebeskedfunktionen er slået til) eller der høres en tone.

Et langt tastetryk på [▲] bringer dig tilbage til standardlytteprogrammet.


*Gælder kun for høreapparater med Zen+

Valg af lytteprogram, hvis du kun har et høreapparat

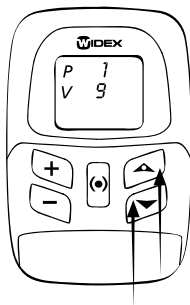


Tryk på [(•)] tasten. Displayet skal nu vise grundindstillingen P1 V9. Vælg det ønskede lytteprogram ved at trykke på tasterne[▲] [▼] .

Fjernbetjeningen slukker automatisk efter ca. 30 sekunder.

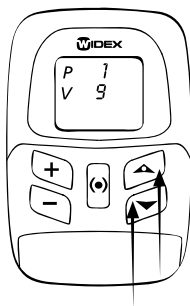

Valg af lytteprogram, hvis du har to høreapparater, som du vil indstille til samme program


Tryk på [(•)] tasten. Displayet skal nu vise grundindstillingen P1 V9. Der kan nu vælges lytteprogram ved hjælp af [▲] [▼] tasterne. Dit valg vil herefter gælde for begge høreapparater. Fjernbetjeningen slukker automatisk efter ca. 30 sekunder.

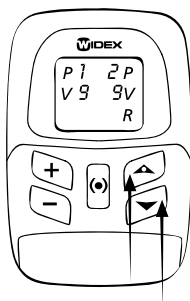

Valg af lytteprogram, hvis du har to høreapparater, som du vil indstille til to forskellige programmer

Du kan kun indstille høreapparaterne til to forskellige lytteprogrammer, hvis fjernbetjeningen er programmeret med denne mulighed.

Tryk på [(•)] tasten. Displayet skal nu vise grundindstillingen P1 V9. Tryk igen på [(•)] tasten. To tal vises ud for P (program), et for hvert høreapparat. Bogstavet R vises i nederste højre hjørne og indikerer, at der nu kan vælges lytteprogram til højre høreapparat ved hjælp af [▲] [▼] tasterne.

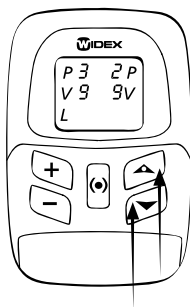

Tryk derefter én gang på [(•)] tasten for at gøre klar til at indstille venstre høreapparat. Bogstavet L vises i nederste venstre hjørne og indikerer, at der nu kan vælges lytteprogram til venstre høreapparat ved hjælp af [▲] [▼] tastene. Fjernbetjeningen slukker automatisk efter ca. 30 sekunder.

Vigtigt: Hvis du skifter mellem at bruge fjernbetjening og knapper på høreapparatet, når du skal justere lydstyrke og vælge lytteprogram, skal du være opmærksom på, at fjernbetjeningen annullerer de justeringer, der er foretaget manuelt på høreapparatet.


Et eksempel: Du justerer lydstyrken eller vælger et lytteprogram ved hjælp af fjernbetjeningen. Derefter slukker fjernbetjeningen. Hvis du nu ændrer lydstyrkeindstilling og lytteprogram ved hjælp af knapperne på høreapparatet og tænder fjernbetjeningen igen, vil høreapparatet stilles tilbage til de indstillinger, det havde, inden fjernbetjeningen slukkede, og inden høreapparatets indstillinger manuelt blev ændret.

Særlige situationer


Nedenstående eksempler er kun relevante for dig, hvis du har to høreapparater og har valgt forskellige programmer og/eller lydstyrkeniveauer.

Eksempel til at illustrere, hvad der sker, når du flytter et program op ([▲] tasten):

Eksempel på oprindelig indstilling:

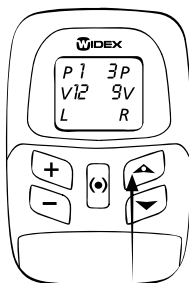


Resultat:

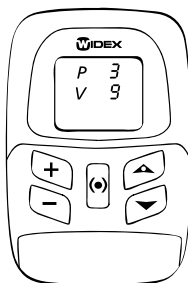


Når både L og R vises i displayet, betyder det, at begge høreapparater kan justeres. Når du flytter et program op, vælger fjernbetjeningen, at det højeste program sammen med lydstyrkejusteringen af det pågældende program gælder for begge høreapparater.

Eksempel til at illustrere, hvad der sker, når du flytter et program ned ([▼] tasten):

Eksempel på oprindelig indstilling:

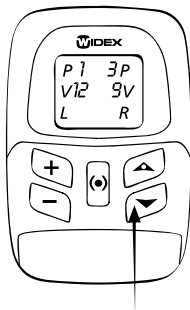


Resultat:

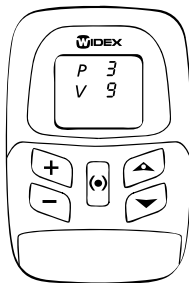


Når både L og R vises i displayet, betyder det, at begge høreapparater kan justeres. Når du flytter et program ned, vælger fjernbetjeningen, at det højeste program sammen med lydstyrkejusteringen af det pågældende program gælder for begge høreapparater.

Eksempel til at illustrere, hvad der sker, når lydstyrken justeres op ([+] tasten):

Eksempel på oprindelig indstilling:

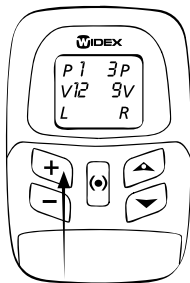


Resultat:

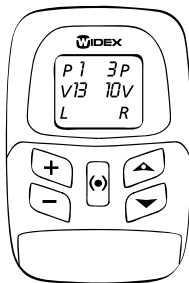


Hvis høreapparaterne er indstillet til forskellige lydstyrkeniveauer, og lydstyrken justeres op, vil fjernbetjeningen øge lydstyrken i begge høreapparater.

Eksempel til at illustrere, hvad der sker, når lydstyrken justeres ned ([−] tasten):

Eksempel på oprindelig indstilling:

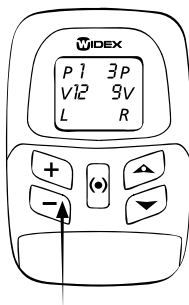


Resultat:

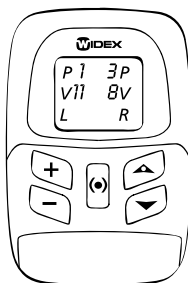

Hvis høreapparaterne er indstillet til forskellige lydstyrkeniveauer, og lydstyrken justeres ned, vil fjernbetjeningen mindske lydstyrken i begge høreapparater.

Hændelseslog

Når hændelsesloggen er slået til, kan du starte 1 minuts logging af lydombgivelserne i høreapparatet.

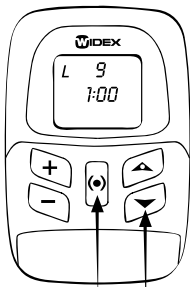


For at aktivere hændelsesloggen skal du holde [(•)] tasten nede, mens du trykker på [▼] tasten.


Høreapparatet begynder at optage data fra den akustiske situation, du befinder dig i. Når hændelsesloggingfunktionen igen anvendes, overspilles den tidligere optagelse med den nye.

Alarm

RC4-2 fjernbetjeningen kan være udstyret med en alarm, hvis det blev valgt under besøget på høreklinikken. Alarmen kan indstilles til at gå i gang efter en nærmere angivet tidsperiode. Her er et eksempel, hvor vi har indstillet alarmen til at gå i gang 2½ time senere.

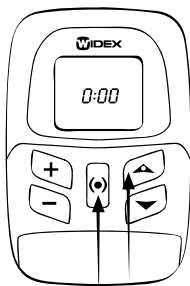

Tryk på [(•)] tasten for at tænde for fjernbetjeningen. Tryk igen på [(•)] tasten og hold den nede, mens du trykker på [▲]. 0:00 vises i displayet.

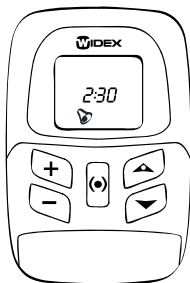

Vælg antal timer ved hjælp af [+] [-] tasterne, som i dette eksempel er 2, og indstil antal minutter ved hjælp af [▲] [▼] tasterne, som i dette eksempel er 30. Nu bør displayet vise 2:30. Tryk derefter på [(•)].



I displayet vises en lille klokke. Hvis du vil indstille alarmen, skal du trykke på [(•)].

Herefter forsvinder klokken, og du kan ændre indstillingen ved at bruge tasterne [+], [-] og [▲] [▼]. Tryk på [(•)] tasten for igen at gøre alarmen (den lille klokke) aktiv. Tryk på [(•)] tasten og hold den nede, mens du trykker på [▲] tasten, hvis du ønsker, at displayet igen skal vise program/volumen.




Når alarmen starter, vises AL og tallene 0:00 skiftevis, og du hører biplyde i høreapparatet. Biplydene gentages cirka hvert ½ minut, og klokken blinker, indtil du slår alarmen fra.

Hold [(•)] tasten nede for at slukke for alarmen.

Vedligeholdelse af RC4-2

RC4-2 fjernbetjeningen vil holde længe, hvis den vedligeholdes rigtigt. Her er et par gode råd, som kan forlænge fjernbetjeningens levetid:

- Fjernbetjeningen er en værdifuld genstand og skal behandles med forsigtighed og omtanke. Når fjernbetjeningen ikke er i brug, skal den opbevares på et køligt og tørt sted, hvor børn og kæledyr ikke kan få fat i den.
- Fjernbetjeningen må ikke udsættes for kraftig varme/kulde eller høj fugtighed.
- Forsøg aldrig selv at åbne eller reparere fjernbetjeningen.
- Fjernbetjeningen rengøres med en blød klud. Brug aldrig vand eller rengøringsmidler.

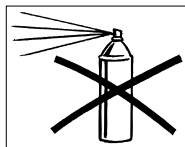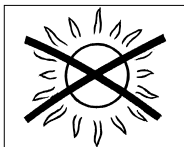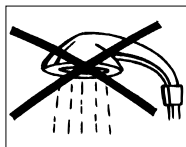

-
- Hvis du skal under strålebehandling (f.eks. røntgen, MR-scanning, CT-scanning, kortbølgediatermi) eller anden lignende behandling, må fjernbetjeningen ikke medbringes. Anbring heller aldrig fjernbetjeningen i en mikrobølgeovn. Sådanne former for stråling kan ødelægge fjernbetjeningen. Den stråling, der kan komme fra f.eks. overvågningssystemer, tyverialarmer og mobiltelefoner, er svagere og vil derimod ikke skade fjernbetjeningen.
 - RC4-2 fjernbetjeningen er ikke godkendt til brug i miner eller andre områder med eksplosive luftarter.

Gode råd

- Vær omhyggelig med, at fjernbetjeningen og dens dele og tilbehør ikke er tilgængelige for børn, der kunne putte dem i munden. Hold også batterier uden for børns rækkevidde og kasser de brugte batterier med omhu. Skift ikke batterier for øjnene af børn, og lad dem ikke se, hvor du opbevarer dine batterier.
- Batterier er meget små og kan nemt forveksles med piller og lignende. Vær derfor opmærksom på, at du ikke putter batterier i munden, da du kan risikere at sluge dem. Er skaden sket, bør du straks kontakte din læge.

Hvis fjernbetjeningen ikke virker

Følg nedenstående råd, inden du kontakter høreklipnikken:


Hvis RC4-2 ikke virker, kan det være fordi:

- Der ikke sker noget, når du trykker på tasterne. Fold beskyttelsesklappen ud for at få nemmere adgang til tasterne.
- Batterierne sidder ikke ordentligt i. Tag begge batterier ud og sæt dem i igen.
- Batterierne er brugt op. Skift batterierne.
- Batteriet i høreapparatet er brugt op. Skift batteri.
- Forbindelsen mellem høreapparat/høreapparater og fjernbetjening er ustabil. Tænd og sluk for høreapparat(erne).

Ekstraudstyr

Der findes følgende ekstraudstyr til fjernbetjeningen:


- En clips-version af batterilåget.
- Etui til fjernbetjeningen.
- Bæresnor til clips-versionen af batterilåget.

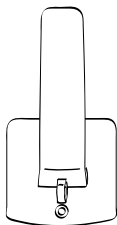

Clips-version




Etui

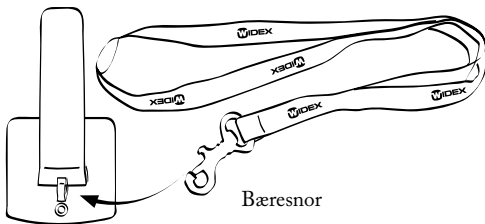

Bæresnor

Clips-versionen har indbygget bælteclips, så du kan sætte RC4 fast i bælte eller bukselinning, samt et "øje", hvor du kan fastgøre bæresnoren, hvis du ønsker at hænge RC4 rundt om halsen.

Skift batterilåg

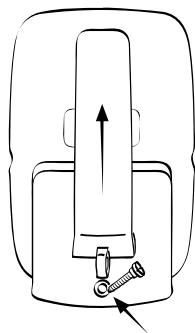

Hvis du vil udskifte standard-batterilåget til en clips-version, skal den lille skrue, der sidder under batterilåget, også skiftes. Når skruen er fjernet, kan clips-batterilåget sættes på ved hjælp af den lange skrue (se illustrationen), der leveres sammen med batterilåget.

Batterilåget sættes på ved at lægge det, som vist på illustrationen. Derefter kan låget nemt skubbes på plads.

Regulatorisk overensstemmelse

Overensstemmelseserklæring

Firma Widex A/S
Ny Vestergårdsvej 25
3500 Værløse
Danmark

erklærer hermed under eneansvar, at
Klasse 2 produkter:

Serie: **RC4**
Startende med serienummer 400000

Modeller: RC4-1 Fjernbetjening
RC4-2 Fjernbetjening

er i overensstemmelse med de relevante krav i:

R&TTE Direktiv 1999/5/EC af 9. marts 1999

og følgende standarder:

EN 300 330-2 V1.1.1

EN 301 489-1 V1.4.1 og EN 301 489-3 V1.4.1

EN 60601-1-2:2001

IEC 60601-1-2:2001

Værløse, 02. december 2008

Udstedelsesdato og -sted



Jan Tøpholm

Administrerende direktør

Inden for EU er produktet beregnet til anvendelse i følgende medlemsstater:

AT	BE	BG	CY	CZ
DE	DK	EE	ES	FI
FR	GB	GR	HU	IE
IT	LT	LU	LV	MT
NL	PL	PT	RO	SI
SE	SK			

Symboler

Symboler, som ofte anvendes af Widex A/S på pakkematerialet (etiketter, brugsanvisninger mv.) til medicinsk udstyr

symbol	Titel/beskrivelse
	Producent Sammen med dette symbol angives navn og adresse på den producent, der har produceret produktet. Såfremt det er relevant, angives produktionsdatoen også.
	Produktionsdato Den dato, hvor produktet er produceret.
	Udløbsdato Produktet må ikke anvendes efter denne dato.
	Batchnummer Produktets batchnummer (identificering af batch)
	Katalognummer Produktets katalognummer (varenummer)
	Serienummer Produktets serienummer*
	Produktet skal beskyttes mod sollys Produktet skal beskyttes mod lyskilder og/eller produktet skal beskyttes mod varmekilder

symbol	Titel/beskrivelse
	Produktet skal holdes tørt Produktet skal beskyttes mod fugt og/eller produktet skal beskyttes mod regn
	Minimumtemperatur Den laveste temperatur, som produktet med sikkerhed kan tåle at blive udsat for.
	Maksimumtemperatur Den højeste temperatur, som produktet med sikkerhed kan tåle at blive udsat for.
	Temperaturforhold De højeste og laveste temperaturer, som produktet med sikkerhed kan tåle at blive udsat for.
	Se brugsanvisningen Brugsanvisningen indeholder vigtig sikkerhedsinformation (advarsler/forholdsregler) og skal læses, inden produktet tages i brug.
	Caution/Warning Tekst markeret med symbolet for advarsler og forholdsregler skal læses, inden produktet tages i brug.
	WEEE-mærke "Må ikke kasseres som almindeligt affald" Når produktet skal kasseres, skal det sendes til et autoriseret indsamlingssted for genbrug og genanvendelse af elektrisk og elektronisk udstyr.

symbol	Titel/beskrivelse
	CE-mærke Produktet overholder kravene i EU-direktiverne for CE-mærket udstyr.
	Bemærk Produktet klassificeres i henhold til R&TTE direktiv 1999/5/EF som Klasse 2 udstyr med visse anvendelsesbegrænsninger i nogle af EU- og EØS-landene.
	C-Tick mærke Produktet overholder de gældende regulatoriske krav til EMC og radiospektrum for produkter, som distribueres til Australien og New Zealand.
	Interference Elektromagnetisk interference kan forekomme i nærheden af produktet.

*Serienummeret er det 6- eller 7-cifrede nummer på produktet. Serienummeret kan være påtrykt uden foranstillet **SN**



WIDEX A/S Nymøllevej 6, 3540 Lyngby, Denmark
www.widex.com

CE 0459

Manualnummer:
9 514 0113 010 #03



MIX
From responsible
sources
FSC® C068122