

Portefeuille de produits

APPAREILS AUDITIFS REMBOURSÉS PAR LA RAMQ
EN VIGUEUR EN NOVEMBRE 2021



Signia

Introduction	3
Liste de prix.....	4
Applis, accessoires et compatibilité avec les aides auditives.....	5
Présentation des produits.....	6
Couleurs offertes	16

Widex

Introduction	19
Liste de prix.....	21
Performance et fonctionnalités.....	22
Applications.....	23
La famille WIDEX EVOKE™	24
Accessoires.....	26

Signia

Tél : 519-622-5200
Sans frais : 1-800-663-0620
Télec : 1-888-429-4644
orders.ca@signia-hearing.com

Widex

Tél : 905-315-8303
Sans frais : 1-800-387-7943
Télec : 905-315-8176
orderdesk.ca@widexsound.com

Adresse

5041 Mainway
Burlington (Ontario)
L7L 5H9



Autonomiser les gens à entendre ce qui importe

Chez Signia, nous nous faisons un devoir d'aider les personnes malentendantes à prendre la décision de porter des aides auditives. Nous avons trouvé des moyens de mettre nos plus récentes solutions au service des utilisateurs et utilisatrices afin de les aider à se surpasser brillamment. Les gens atteints de perte auditive ne veulent pas se sentir vieux, parce qu'ils sont encore jeunes. Ils veulent des solutions auditives qui correspondent à leurs mode de vie actif et esprit volontariste.

Nos plus récentes innovations en matière de capacité de recharge comportent des qualités de rendement audiolgique, d'esthétisme et de facilité d'emploi fort attrayantes pour votre future clientèle qui en profite déjà avec les produits couramment offerts sur le marché. Ces solutions audios du 21^e siècle sont appelées à habilitier une plus grande partie de votre clientèle à se surpasser brillamment.

Liste de prix pour les aides auditives remboursées par la Régie de l'assurance maladie du Québec

Aides auditives	Couleurs offertes	Prix
Pure 312 3X RIC 312	Beige, Noir, Argenté, Gris souris	113,10 \$
Carat 3px RIC 13	Beige, Noir, Chocolat, Gris ardoise	113,10 \$
Motion SP 3px BTE 675	Beige, Noir, Chocolat, Gris ardoise	117,25 \$
Motion P 3px BTE 13	Beige, Noir, Chocolat, Gris ardoise	117,25 \$
Motion SX 3px BTE 13	Beige, Noir, Chocolat, Gris ardoise	117,25 \$
Motion SA 3px BTE 13	Beige, Noir, Chocolat, Gris ardoise	117,25 \$
Motion S 3px BTE 312	Beige, Noir/Gris ardoise, Chocolat/Gris ardoise, Gris ardoise	117,25 \$
Insio 3px HS 312	Beige, Havane, Moka, Brun, Chocolat	117,25 \$

CROS	Prix
CROS Pure 312 X	800,00 \$
CROS Pure px	800,00 \$

Accessoires remboursés par la RAMQ	Prix
Télécommande miniPocket	22,00 \$
Sabot d'entrée audio	12,00 \$
Corde audio binaurale	30,00 \$
Corde audio monaurale	30,00 \$
Vérificateur de pile	8,00 \$
Tube d'écoute	20,00 \$
Oto-clip	20,00 \$









Accessoires disponibles avec frais supplémentaires	Prix
StreamLine TV	245,00 \$
StreamLine Mic	295,00 \$
Smart Connect Booster	150,00 \$
Smart Transmitter	95,00 \$

Garanties
Aides auditives et télécommande miniPocket Garantie de 2 ans. Aucune protection perte et dommage.
Réparation d'aides auditives dont la garantie est échu Garantie de 6 mois sur la réparation 225,00 \$.
Embouts sur mesure Garantie de 3 mois.

Embouts	Prix
Embout sur mesure Consulter le bon de commande pour les options.	40,00 \$

Applis, accessoires et compatibilité avec les aides auditives

Voici un aperçu des applis et accessoires compatibles avec les aides auditives Signia. Selon la solution choisie, ces diffuseurs audio, télécommandes et transmetteurs CROS/BiCROS bien assortis sauront rehausser et optimiser l'expérience auditive chez leurs utilisateurs.

Aide auditive	Diffuseur audio			Accessoire pour diffuseur audio	Télécommandes		CROS/BiCROS	
								
	StreamLine TV	StreamLine Mic	Smart Connect Booster	TV Transmitter*	Appli Signia	miniPocket	CROS Pure px	CROS Pure 312 X
Pure 312 X	●	●	-	-	●	●	-	●
Carat primax	-	-	●	●	●	●	●	-
Motion SP primax	-	-	●	●	●	●	●	-
Motion P primax	-	-	●	●	●	●	●	-
Motion SX primax	-	-	●	●	●	●	●	-
Motion SA primax	-	-	●	●	●	●	●	-
Motion S primax	-	-	●	●	●	●	●	-
Insio primax	-	-	●	●	●	●	●	-

* Smart Connect Booster requis.



Signia App et TeleCare

L'application Signia App pour les téléphones intelligents iOS et Android de vos clients n'affichent que les fonctions utilisateurs qui s'appliquent à leur dispositif. Le service TeleCare vous permet de venir en aide à vos clients et clientes, à distance, en situation de vie réelle et au moment même où ils en ont besoin. Vous pouvez recevoir des patients par visites virtuelles, par téléphone ou par vidéoconférence et ajuster les aides auditives à distance dans le logiciel Connexx.



Télécommande miniPocket

Assez petite pour être attachée à un porte-clés, la télécommande miniPocket est la solution idéale pour la personne qui recherche la discrétion et un contrôle pratique des appareils, sans toutefois utiliser une télécommande encombrante ou un téléphone intelligent.



Pure 312 X

Discrète. Élégante. Connectée.

Intégrant tous les avantages de la plateforme Xperience de Signia, la Pure 312 X attire les utilisateurs et utilisatrices par l'élégance et la minceur de son format. Malgré sa forme discrète, le modèle Pure 312 fournit une connexion Bluetooth complète pour profiter pleinement de la musique, des appels téléphoniques et de la télé. Une bobine téléphonique intégrée est également offerte.



Caractéristiques clés

- Perception de sa propre voix et compréhension de la parole des plus naturelles dans le bruit, même pendant les déplacements.
- Premiers détecteurs de son et de mouvement intégrés au monde.
- Diffusion audio en continu de haute qualité de longue durée.
- Fonction e2e ultra HD et connectivité Bluetooth.



Appli Signia prêt à utiliser.

- Assistant Signia
- Service TeleCare
- Commande à distance
- Connectivité et diffusion en continu



À connectivité Bluetooth



Conception à bobine téléphonique intégrée offerte par le biais de la trousse de conversion du boîtier



Détecteurs de son et de mouvement intégrés

Dômes



Outil pour miniRécepteur



Pare-cérumen miniRécepteur



Outil de mesure 2.0



Manchons



Outil pour embout RIC




Pare-cérumen QuickGuard (pour embouts compatibles)




Couleurs :




Pure 312 3X

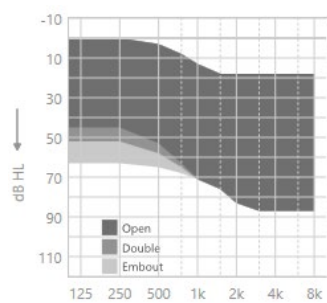

Ecouteur S - 45/108dB (2cc)

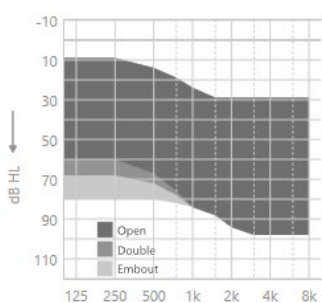

Ecouteur M - 60/118dB (2cc)

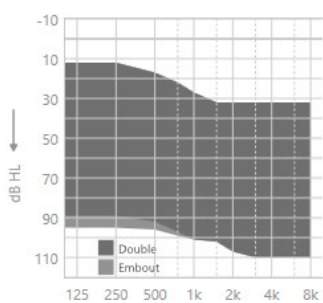

Ecouteur P - 70/130dB (2cc)

Caractéristiques

Canaux fréquentiels/
compression

24/12

Détecteur de mouvement

●

OVP

●

DSP

●

Programmes auditifs

6

Taille de la pile

312

Consommation

1.7-1.9 mA

e2e sans fil 3.0

●

Diffusion directe en continu

●

TeleCare

●

Traitement anti-acouphène

●

CROS/BiCROS

●

eWindscreen monaural

●

Bouton-bascule programmable

●

TwinPhone

●

Bobine téléphonique

○

Cote de résistance à la poussière
et à l'humidité

IP-68

- Standard/compatible
- Optionnel

Compatibilité accessoires et appli

Signia app

●

Assistant Signia

●

StreamLine TV/StreamLine Mic

●

miniPocket

●

Noahlink Wireless

●

Câble/adaptateur

-

Ensemble pour ajustement

miniReceiver 2.0

Assistant Signia

L'Assistant Signia est l'outil moderne du spécialiste de la santé auditive et de l'utilisateur modernes. Utilisant l'intelligence artificielle, l'assistant Signia apprend à reconnaître les préférences auditives et les situations d'écoute de l'utilisateur afin de lui procurer la meilleure sensation auditive possible. Découvrez comment il fonctionne et pourquoi il procure un énorme avantage à la fois aux spécialistes de la santé auditive et aux utilisateurs et utilisatrices d'appareils auditifs. Cette innovation s'avère des plus utiles alors que, bien souvent encore, les visites en clinique ne sont pas toujours possibles.



Balayez le code QR ou [cliquez ici](#) pour en savoir plus




Mode masque

Pendant la pandémie, le port du masque et la distanciation physique sont des obstacles à l'audition qui peuvent être frustrants, même pour les personnes qui ont une ouïe normale. Pour les personnes malentendantes, cette situation est particulièrement difficile. L'appli Signia fournit aux utilisateurs d'aides auditives une solution à la fois simple et efficace pour communiquer en portant un masque. À la seule touche d'un bouton, le mode Masque modifie les réglages des aides auditives. Signia offre, aux spécialistes de la santé auditive, des solutions flexibles pour optimiser l'intelligibilité de la parole dans cette nouvelle normalité de notre monde.



Balayez le code QR ou [cliquez ici](#) pour en savoir plus

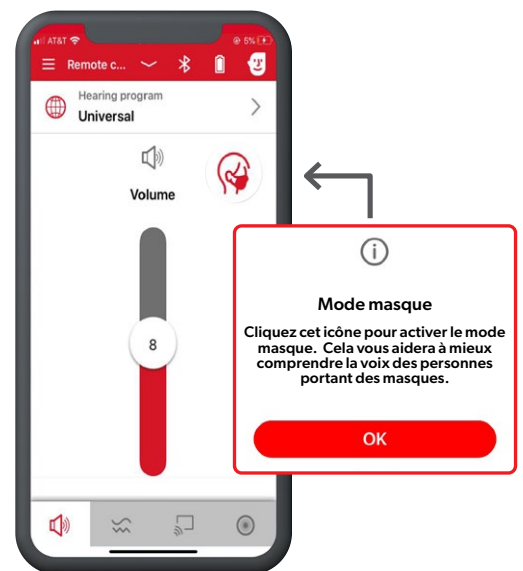


OVP^{MC}

Système de traitement de sa propre voix

Les aides auditives Signia Pure 312 X ont une solution de haute technicité au problème qu'éprouve l'utilisateur qui entend sa propre voix : la détection en temps réel de la voix de l'utilisateur, combinée au système spécialisé de traitement de sa propre voix, OVP. Pour utiliser le système OVP, le patient doit effectuer une courte manœuvre pour personnaliser les appareils pendant l'ajustement initial.



Balayez le code QR ou [cliquez ici](#) pour en savoir plus

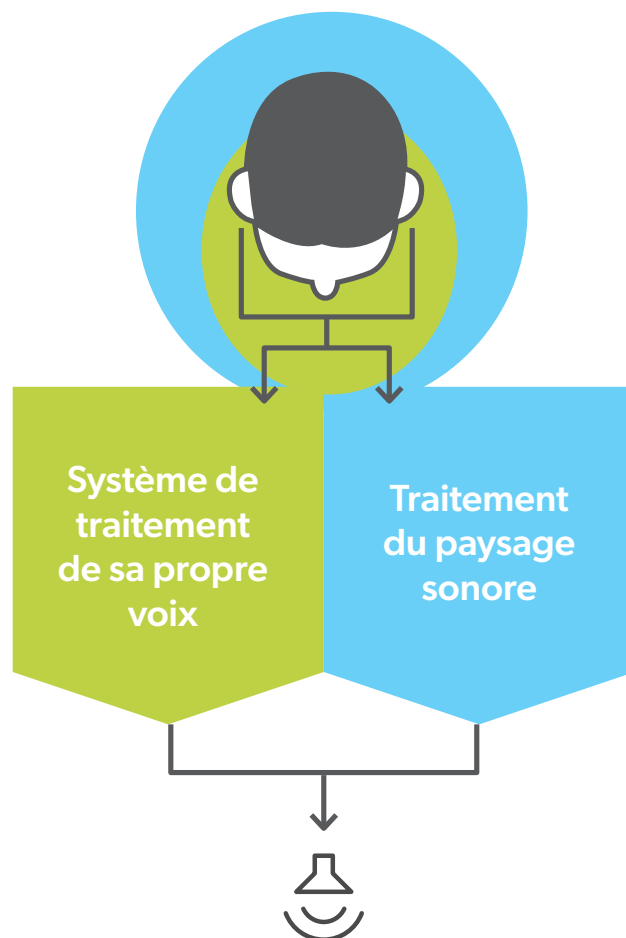

Carat primax

À la rencontre de la puissance et de la polyvalence.

Faisant partie de notre gamme de produits puissants, les élégantes aides auditives Carat primax ont été conçues pour permettre une amplification optimale et procurer une sensation auditive exceptionnelle. Intégrant tous les avantages de la plateforme primax, ce modèle RIC discret convient à presque tous les degrés de perte auditive. Compatible avec une large gamme d'accessoires pratiques, ce modèle réunit confort accru et discrétion absolue.

Carat primax. Aussi unique que vous.

Caractéristiques clés

- Pile 13
- Connexion sans fil
- TwinPhone



Appli Signia prêt à utiliser



Compatible avec l'appareil CROS



Avec thérapie par encoche pour le traitement anti-acouphènes

e2e sans fil

Système d'échange de données sans fil de troisième génération permettant l'activation des fonctions binaurales des appareils Carat primax.

Microphones directionnels

Emplacement et orientation optimisés assurent le meilleur rendement auditif binaural possible.

CROS/BiCROS sans fil

Le dispositif émetteur transmet les signaux audio traités à l'aide auditive de l'autre oreille par le biais de la fonction e2e sans fil.

Thérapie anti-acouphènes

Les aides auditives Carat primax offrent un choix de thérapies anti-acouphènes Signia.

Connexion sans fil via Smart Connect Booster

Diffusion audio et fonction de contrôle par télécommande en toute facilité.

TwinPhone

Le signal téléphonique est transmis clairement d'une aide auditive à l'autre.

miniRécepteur 2.0

Procure un rendement sonore à toute épreuve. Offert en longueurs différentes et niveaux de puissance S, M et P.




Carat primax

Couleurs :



Carat 3px

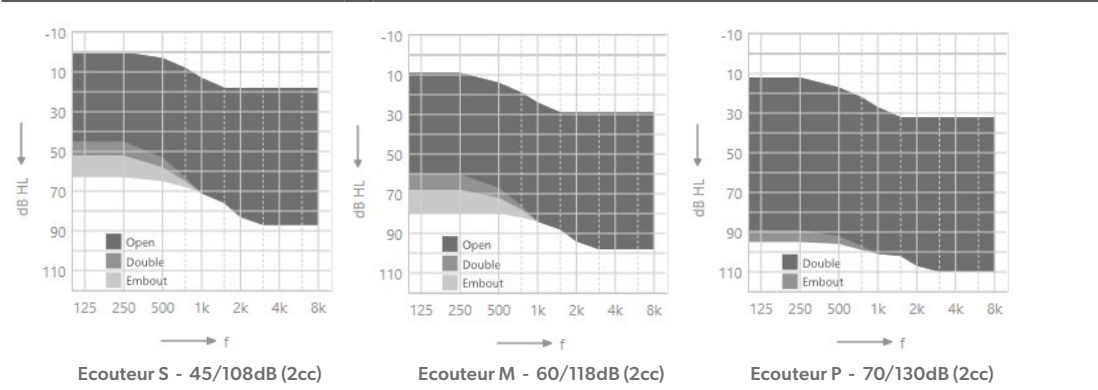

Caractéristiques

Canaux fréquentiels/compression	24/12
Programmes auditifs	6
Taille de la pile	13
Consommation	0.9-1.1 mA
e2e sans fil	●
TeleCare	●
Traitement anti-acouphène	●
CROS/BiCROS	●
eWindscreen monaural	●
Bouton-bascule programmable	●
TwinPhone	●
Bobine téléphonique	●
Autophone	●

- Standard
- Optionnel

Compatibilité accessoires et appli

Signia app	●
Smart Connect Booster	●
TV transmitter	●
miniPocket	●
ConnexxAir	●
Câble/adaptateur	●
Ensemble pour ajustement	miniReceiver 2.0

Dômes



Outil pour miniRécepteur



Pare-cérumen miniRécepteur



Outil de mesure 2.0



Manchons



Outil pour embout RIC



Pare-cérumen QuickGuard (pour embouts compatibles)



Motion primax

Élégantes. Pratiques. Sans effort.

Entièrement équipées, élégantes et robustes, les aides auditives Motion primax sont des contours d'oreille munis de microphones directionnels qui procurent une véritable audition binaurale. Offerte dans une vaste gamme de modèles, allant de S aux modèles puissants SP, la famille d'appareils Motion primax répond aux exigences des pertes auditives modérées à profondes. Les modèles SA, P et SP peuvent être adaptés avec sabot pour entrée audio directe. La petite Motion S primax est particulièrement conviviale et un choix idéal pour quiconque souhaite des ajustements sans tracas. Une vaste gamme d'accessoires est également offerte, comprenant la télécommande Smart Connect Booster qui permet à l'utilisateur de changer de programme, de régler le volume ou de diffuser du contenu audio en toute facilité.

Motion primax. Redéfinir la facilité naturelle d'entendre.

Motion SP primax
Motion P primax
Motion SX/SA primax
Motion S primax

Caractéristiques clés

- Boîtier compact et élégant
- Manipulation simple
- TwinPhone
- Option pour modèles Motion SA, P et SP primax : entrée audio directe par sabot audio



Appli Signia prêt à utiliser



Compatible avec l'appareil CROS



Avec thérapie par encoche pour le traitement anti-acouphènes

Microphones directionnels

Emplacement et orientation optimisés assurent le meilleur rendement auditif binaural possible.

TwinPhone

Le signal téléphonique est transmis nettement d'une aide auditive à l'autre.

Double contrôle intégré

Bouton-poussoir et interrupteur à bascule intégrés pour un contrôle manuel, y compris un verrou de fonction programmable pour empêcher les changements involontaires de programme ou de réglage du volume.

Témoin lumineux à DEL

Témoin à DEL activé dans Connexx indique que l'aide auditive est allumée, les changements de programme, et une pile faible.

Fonction de traitement anti-acouphènes

Les aides auditives Motion primax offrent un choix de thérapies anti-acouphènes Signia.

CROS/BiCROS sans fil

L'émetteur transmet des signaux audios traités à l'aide auditive de l'autre oreille par le biais de la fonction e2e sans fil.

Connexion sans fil via Smart Connect Booster

Diffusion audio et fonction de contrôle par télécommande en toute facilité.

e2e sans fil

Système d'échange de données sans fil de troisième génération permettant l'activation des fonctions binaurales des appareils Motion primax.

Option : entrée audio directe

Les modèles Motion SA, P et SP primax sont offerts avec un compartiment à pile standard qui peut être remplacé par un avec connexion d'entrée audio directe.

Motion SP primax

Couleurs pour Motion px SP, P, SX, et SA



Couleurs pour Motion S px




Motion SP 3px

Motion P 3px

Motion SX/SA 3px

Motion S 3px

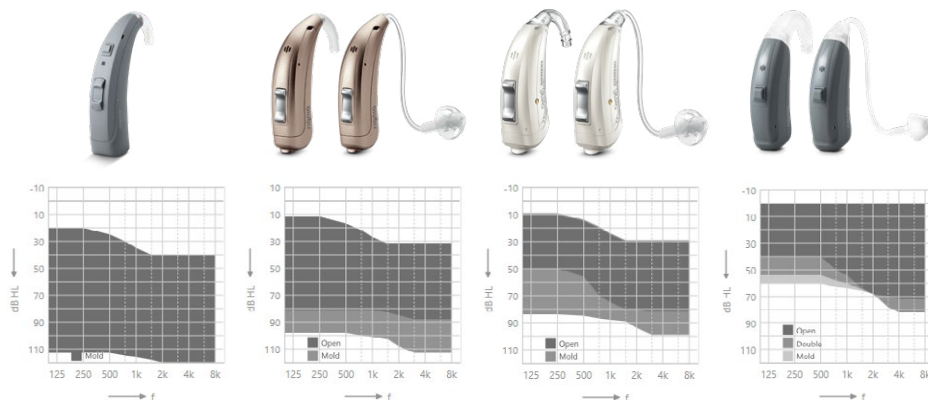

Caractéristiques

Canaux fréquentiels/
compression

24/12

24/12

24/12

24/12

Matrice (dB, 2cc)

Coude 82/140

Coude 77/135

Coude 60/130

Coude 55/124

Programmes auditifs

6

6

6

6

Taille de la pile

675

13

13

312

Consommation

2.1 mA

1.0-1.6mA

1.0-1.1mA

0.9mA

e2e sans fil

●

●

●

●

TeleCare

●

●

●

●

Traitement anti-acouphène

●

●

●

●

CROS/BiCROS

●

●

●

-

eWindscreen monaural

●

●

●

●

Bouton-bascule programmable

●

●

●

-

Bouton-Poussoir

●

-

-

●

TwinPhone

●

●

●

-

Bobine téléphonique

●

●

●

-

Autophone

●

●

●

-

Entrée audio - sabot

●

-

-

-

Entrée audio - sabot intégré
au tiroir-pile

-

●

●*

-

Entrée audio - via Smart Connect
Booster

●

●

●

●

Témoin lumineux DEL

●

-

-

-

- Standard
- Optionnel

* Non offerte pour
Motion SX

Compatibilité accessoires et appli

Signia app

●

●

●

●

Smart Connect Booster

●

●

●

●

TV transmitter

●

●

●

●

miniPocket

●

●

●

●

ConnexxAir

●

●

●

●

Câble/adaptateur

●

●

●

●

Ensemble pour ajustement

-

ThinTube

ThinTube

LifeTube

Insio primax

Discrètes. Personnalisées. Sans effort.

Ensemble, la vie est bien meilleure. Les aides auditives Insio^{MC} de Signia sont conçues sur mesure pour s'adapter à l'anatomie de votre oreille et au degré de votre perte auditive afin que vous puissiez profiter du temps passé avec vos proches sans vous soucier de votre audition et de votre apparence. Grâce à son format étonnamment discret et à sa qualité de son exceptionnelle, le modèle Insio vous redonne confiance pour savourer les choses importantes de la vie.

Les aides auditives Insio primax. La légèreté d'entendre discrètement sur mesure.

Caractéristiques clés

- Petit format jusqu'à une matrice à haute puissance
- Options intégrales sans fil et télécommande pour tous les modèles
- Choix de puissance



Appli Signia prêt à utiliser



Compatible avec l'appareil CROS



Avec thérapie par encoche pour le traitement anti-acouphènes

Fonction de traitement anti-acouphènes

Insio primax offre les thérapies anti-acouphènes de Signia.

Connexion sans fil via Smart Connect Booster

Diffusion audio et fonction de contrôle par télécommande en toute facilité.

CROS/BiCROS sans fil

Le dispositif émetteur transmet les signaux audio traités à l'aide auditive de l'autre oreille par le biais de la fonction e2e sans fil.

TwinPhone

Le signal téléphonique est transmis clairement d'une aide auditive à l'autre.

Microphones directionnels

Emplacement et angle optimisés pour assurer la meilleure audition possible.

Insio primax HS

Réglage du volume

Roulette classique de contrôle de volume avec plage de jeu programmable dans Connexx.

Pare-cérumen QuickGuard




Couleurs de platine :



Couleurs de coquille :



Insio 3px

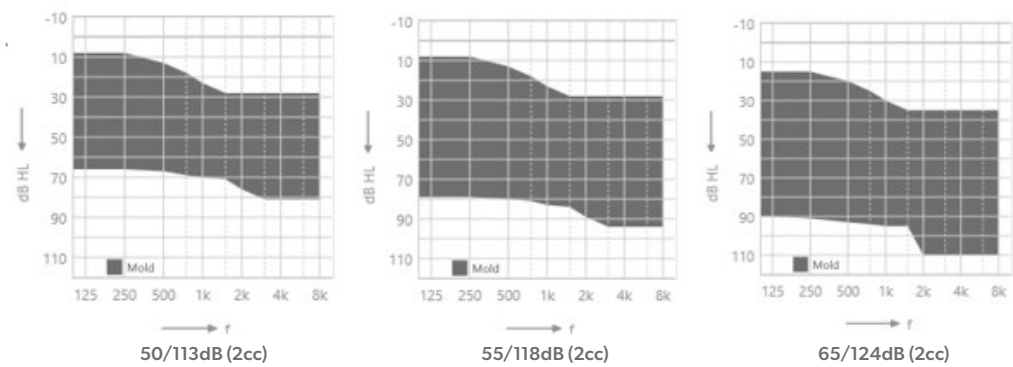

Caractéristiques

















Canaux fréquentiels/ compression	24/12
Programmes auditifs	6
Taille de la pile	312
Consommation	1.1 mA
e2e sans fil	●
TeleCare	●
Traitement anti-acouphène	●
CROS/BiCROS	○
eWindscreen monaural	●
Bouton-poussoir programmable	○
Contrôle de volume	○
TwinPhone	○
Bobine téléphonique	○
Autophone	○













- Standard
- Optionnel

APP/Accessory compatibility

Signia app	●
Smart Connect Booster	●
TV transmitter	●
miniPocket	●
ConnexxAir	●
Câble/adaptateur	●

Couleurs offertes

Modèles	Pure 312 X	Carat px	Motion SP px	Motion P px
Beige				
Noir				
Noir/Gris ardoise	-	-	-	-
Chocolat	-			
Chocolat/Gris ardoise	-	-	-	-
Gris ardoise	-			
Argenté		-	-	-
Gris souris		-	-	-

Motion SX px	Motion SA px	Motion S px
		
		-
-	-	
		-
-	-	
		
-	-	-
-	-	-



UN SON PUR, NATUREL ET
PERSONNALISÉ OFFRANT AUX
PATIENTS UNE EXPÉRIENCE
AUDITIVE CONFORTABLE ET
AGRÉABLE




SOUND LIKE NO OTHER

WIDEX EVOKE™

ÉVOLUE DANS LA VIE RÉELLE

WIDEX EVOKE™ est basée sur notre plateforme, inspirée de notre philosophie d'écoute réelle (Real-Life Hearing™). Chaque aide auditive Widex a pour objectif une audition parfaite, sans effort, permettant aux utilisateurs de profiter pleinement de chaque moment de la vie. La plateforme à double noyaux avancée propose une automatisation intelligente, ainsi que des fonctions intuitives, contrôlées par l'utilisateur. Elle exploite l'apprentissage automatique pour créer la meilleure expérience d'écoute réelle.

LA BASE TECHNIQUE

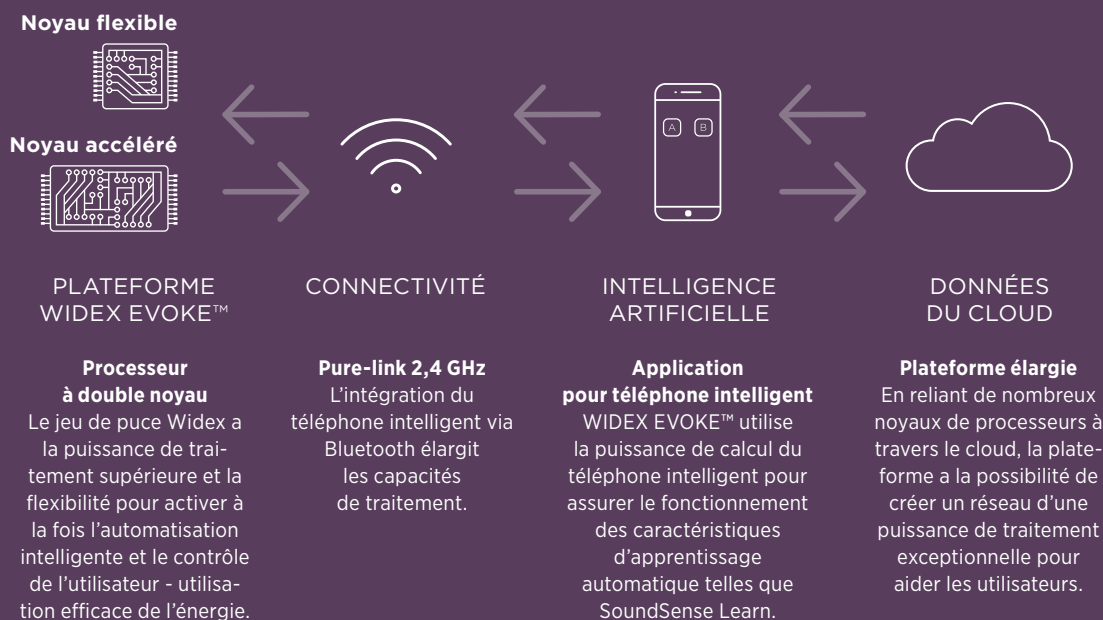

LISTE DES APPAREILS AUDITIFS WIDEX REMBOURSÉS PAR LA RAMQ

En vigueur le 1^{er} novembre 2021

Numéro d'item	Modèle	Style	Prix RAMQ
---------------	--------	-------	-----------

WIDEX EVOKE™220

ERB2D 220	RIC 312 D	RIC, 2.4 GHz	140,00 \$
E-FM 220	FASHION MINI	MINI BTE	
EBB3D 220	BTE 13 D	BTE, 2.4 GHz	
E-FP 220	FASHION POWER	BTE puissant	

WIDEX CROS¹

CROS-FS ¹	Appareil CROS ou BiCROS sans fil avec contrôle marche/arrêt de la diffusion (style RIC FUSION)	800,00 \$
CROS-FA ¹	Appareil CROS ou BiCROS sans fil avec contrôle marche/arrêt et contrôle de volume de la diffusion (style BTE FASHION)	800,00 \$

1. CROS est compatible avec tous les appareils auditifs EVOKE avec connectivité, à l'exception des modèles 2.4 GHz.

ACCESSOIRES

Produit	Description	Prix RAMQ
RC2-DEX	Commande à distance pour le changement des programmes et le contrôle du volume/de la préférence, avec verrou pour les touches	13,00 \$

EMBOUTS PERSONNALISÉS POUR MODÈLES RIC & TUBES FINS


Produit	Description	Prix RAMQ
LONGUEUR EXTENDED	Embout personnalisé, longueur extended, matériel dur ou souple, pour RIC et tubes fins	40,00 \$
LONGUEUR TRADITIONNELLE	Embout personnalisé, longueur traditionnelle, matériel dur ou souple, pour RIC et tubes fins	40,00 \$
INTÉGRÉ	Embout personnalisé, intégré, matériel dur, pour RIC	40,00 \$
MODULAIRE	Embout personnalisé, modulaire, matériel dur, pour RIC	40,00 \$

GARANTIES (tous les appareils auditifs Widex comprennent une période d'essai de 90 jours)


Service	Garantie
Nouveaux appareils auditifs et accessoires	24 mois Aucune garantie perte et dommage
Réparation d'appareils auditifs hors garantie	6 mois (210,00 \$)
Embouts personnalisés, nouveaux et hors garantie	3 mois

PERFORMANCE ET FONCTIONNALITÉS


EVOKE 220		
AUDIBILITÉ/ÉCOUTE DANS LE CALME		
Compression à vitesse variable		Débrayage automatique pour un son homogène et une audibilité stable
Compression dynamique à gamme extra large		Offre plus de gain pour les sons doux, intelligibilité de la parole et confort pour les sons forts, permettant aux utilisateurs une reproduction des capacités auditives normales
Réduction du bruit de faible intensité		Réduit les bruits de fond de faible intensité indésirables pour un plus grand confort d'écoute
ÉCOUTE DANS LE BRUIT		
Technologie True-Input		Gamme dynamique linéaire des niveaux d'entrée de 108 dB (5 à 113 dB SPL) afin de maximiser l'audibilité
Locator haute définition		Pour une meilleure intelligibilité de la parole dans le bruit avec une directivité spécifique en fréquence pour une mise en évidence de la parole
Réduction du bruit		Augmente le confort d'écoute dans le bruit et contribue à l'audibilité de la parole
CONFORT DE L'UTILISATEUR		
Contrôle de préférence		Permet à l'utilisateur l'ajustement simultané de plusieurs paramètres et fonctionnalités pour obtenir plus d'"audibilité" ou plus de "confort" dans une situation donnée
Analyseur fluide sonore (classes de sons)	4	Analyse intuitive de l'environnement sonore afin de prioriser et de sélectionner les sources sonores les plus importantes
Suppression active et multi-directionnelle de l'effet Larsen	IA	Système de suppression active et multidirectionnelle du Larsen minimisant le sillement sans compromettre la qualité sonore
Atténuateur TruSound		Préserve le confort en cas de sons soudains à tous les niveaux d'entrée en atténuant l'impact/les bruits impulsifs
Contrôle automatique de la sortie TruSound AOC		Gestion des niveaux de sortie élevés, éliminant la distorsion et préservant la qualité sonore
Détecteur de bruit impulsif		Détecte et minimise les sons transitoires forts indésirables
FONCTIONS CONTRÔLÉES PAR L'UTILISATEUR		
Programmes d'écoute	3	Vaste gamme de programmes d'écoute pour des situations complexes et spécifiques
Volume/changement de programme interaural		Changements de programme et de volume synchronisés entre les deux aides auditives, permettant des ajustements uniformes
Modes de diffusion parole (P) /musique (M)		Mode de diffusion spécifique au signal diffusé (parole vs musique). Disponible seulement pour les modèles MFi (RIC 312 D et BTE 13 D)
SmartSpeak/SmartTone		Voix enregistrées disponibles en plusieurs langues ou bips sonores indiquant les différentes fonctionnalités de l'aide auditive
Zen/Zen+	IA	Un outil de gestion pour réduire les effets des acouphènes grâce à des tonalités et/ou des bruits apaisants; programmes supplémentaires avec Zen+
ENTENDRE LES FRÉQUENCES AIGÜES		
Transposition fréquentielle		Améliore la perception et la production des signaux vocaux importants de fréquence aiguë
PROGRAMMATION ET RÉGLAGE FIN		
Canaux de traitement	10	Pour un traitement exact puis une expérience sonore et une intelligibilité de la parole plus précises
Canaux de réglage fin	10	Plus d'options pour un son personnalisé afin de satisfaire les préférences et les besoins auditifs de l'utilisateur
Options de méthodologies d'adaptation	WFR/NAL-NL2/DSL V5	La méthodologie d'adaptation Widex (WFR) se veut la méthodologie par défaut dans GPS et permet une adaptation plus précise assurant plus de confort et d'audibilité pour l'utilisateur. La méthodologie WFR offre les niveaux avec et sans expérience du port d'appareils auditifs
Sensogramme haute résolution (9 bandes de programmation)		Mesure de seuils in situ pour une adaptation plus précise
Journal sonore/Enregistrement de données		Visuel de l'utilisation des aides auditives, des environnements ainsi que des données des programmes personnels créés par le patient

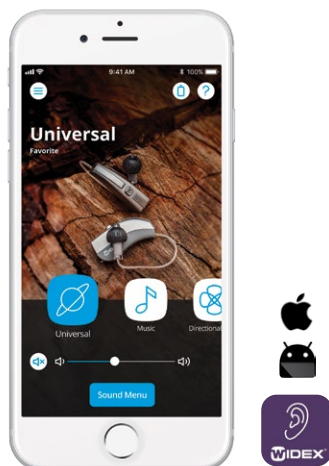APPLICATION **EVOKE™**


- Commande à distance et accès aux fonctionnalités avancées, y compris **SoundSense Learn**, un algorithme IA sophistiqué basé sur l'apprentissage automatique qui guide sans effort l'utilisateur vers une expérience auditive améliorée et plus personnalisée
- Contrôle TV PLAY™ et accès aux paramètres avancés
- Compatible seulement avec les modèles **EVOKE™** 2.4 GHz (RIC 312 D et BTE 13 D)

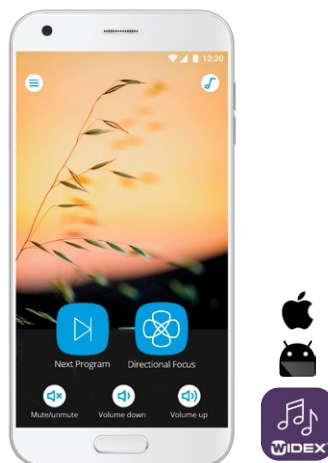APPLICATION **TONELINK™**


- Commande à distance acoustique
- Compatible avec tous les modèles **EVOKE™** avec connectivité

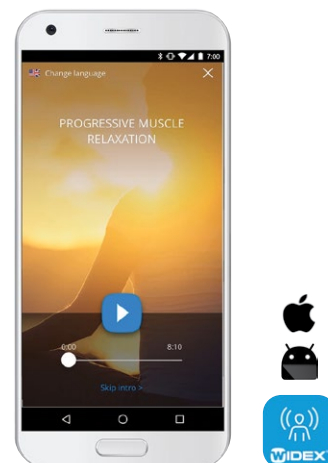APPLICATION **ZEN, TINNITUS MANAGEMENT**

- Faites l'écoute de sons relaxants pour diminuer votre perception de l'acouphène et détendre votre esprit
- Ne nécessite pas le port d'aides auditives pour son utilisation

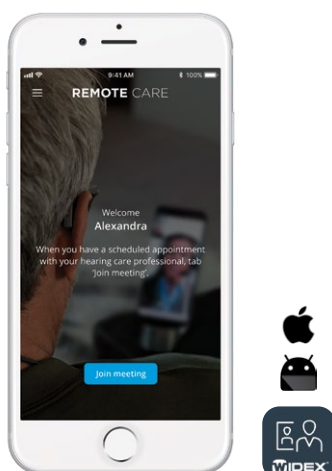APPLICATION **REMOTE CARE™**

- Accès à l'assistance auditive en temps réel, où que vous soyez
- Appareil REMOTE LINK requis pour son utilisation
- Compatible avec toutes les aides auditives Widex avec connectivité

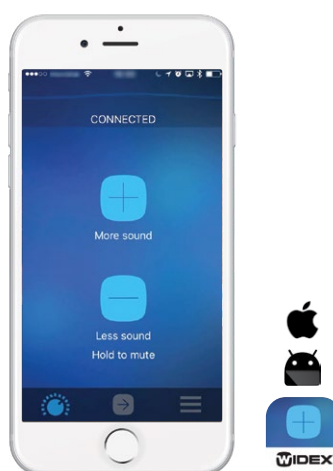APPLICATION **COM-DEX**

- Commande à distance pour aides auditives
- COM-DEX requis pour son utilisation
- Compatible avec toutes aides auditives Widex avec connectivité






Apple et le logo Apple sont des marques déposées d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et d'autres pays. App Store est une marque de service d'Apple Inc. Android, Google Play et le logo Google Play sont des marques enregistrées de Google Inc.

LA FAMILLE WIDEX EVOKE™



MODÈLE	RIC 312 D	RIC 312 D	RIC 312 D
STYLE TYPE	RIC	RIC	RIC
ÉCOUTEUR / TUBE FIN / CROCHET	Écouteur S	Écouteur M	Écouteur P
Option adaptation ouverte	Oui	Oui	-
Grosseur de la pile	312	312	312
Autonomie de la pile	165 heures	165 heures	155 heures
Protection contre les intempéries et la poussière	IP-68	IP-68	IP-68
FONCTIONS CONTRÔLÉES PAR L'UTILISATEUR			
Contrôle de préférence	via bouton, DEX ou app EVOKE	via bouton, DEX ou app EVOKE	via bouton, DEX ou app EVOKE
Changement de programme	via bouton, DEX ou app EVOKE	via bouton, DEX ou app EVOKE	via bouton, DEX ou app EVOKE
Bobine téléphonique	Oui	Oui	Oui
ACCESSOIRES			
Compatible avec les appareils DEX*	Oui	Oui	Oui
TV PLAY	Oui	Oui	Oui
CROS	-	-	-
Compatible avec EAD	via FM+DEX	via FM+DEX	via FM+DEX
DÉTAILS TECHNIQUES			
Gain max/MPO (dB/dB SPL)	52 / 107	58 / 114	64 / 122
Bande passante (Hz)	100 - 10 000	100 - 10 000	100 - 6750
Étendue d'appareillage (dB)	0 - 80	0 - 90	40 - 110

* COM-DEX, FM+DEX, PHONE-DEX 2, PHONE-DEX 2 EXTENSION, PERFECTDRY LUX, RC-DEX, REMOTE LINK, TV-DEX, TV PLAY

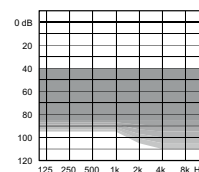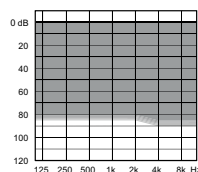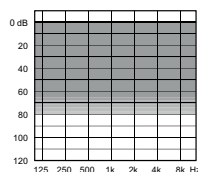

COULEURS RIC/BTE



Brun
capp.



Noir
tech



Gris
argenté



Beige
automne

**FASHION MINI**

MINI BTE
Tube fin / crochet
Oui
312
140 heures
IP-68

**BTE 13 D**

BTE
V2 Tube fin / crochet
Oui
13
225 heures
IP-68

**FASHION POWER**

BTE puissant
Crochet
-
13
265 heures
IP-68

via bouton, DEX ou app TONELINK

via bouton, DEX ou app TONELINK

-

Oui

-

Oui

via FM+DEX

59 / 130

100 - 8450

0 - 95

contrôle à même l'AA, DEX ou app EVOKE

contrôle à même l'AA, DEX ou app EVOKE

Oui

Oui

Oui

-

via FM+DEX

68 / 135

100 - 7900

10 - 105

contrôle à même l'AA, DEX ou app TONELINK

contrôle à même l'AA, DEX ou app TONELINK

Oui

Oui

-




Oui

via FM+DEX

75 / 135

100 - 6250

20 - 110

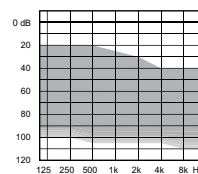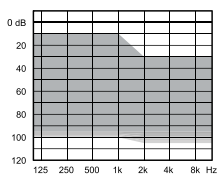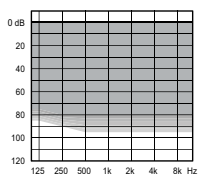

CONNECTIVITÉ DEX COMPLÈTE

Avec WIDEX **EVOKE™**, la connectivité ne s'arrête pas aux applications. Notre sélection de solutions de communication DEX permet de connecter les utilisateurs à tout un monde sonore.

COM-DEX

CARACTÉRISTIQUES

- Une réelle communication mains-libres
- Compatible avec la plupart des téléphones portables
- Diffusion audio depuis la plupart des appareils Bluetooth
- Disponible en trois couleurs élégantes
- 8 heures de diffusion
- 8 jours de temps de veille/contrôle*
- Collier confortable en tissu
- Contrôle des aides auditives via l'application COM-DEX

*12 heures par jour



TV-DEX

CARACTÉRISTIQUES

- Son de haute qualité
- Délai Echo-Free™ ultrafaible
- Entrées pour téléviseur et systèmes hi-fi
- Fonctionnalité Coupure des microphones
- Capacité: 10 heures continues
- Rechargeable au moyen de la TV Base



PHONE-DEX 2

CARACTÉRISTIQUES

- Répondeur intégré
- Portée pouvant aller jusqu'à 50 mètres de la base
- Enregistre jusqu'à 150 contacts
- Plus de 13 jours en veille et 14 heures de temps d'appel



PHONE-DEX 2 EXTENSION

CARACTÉRISTIQUES

- Combiné confortable
- Une extension au système PHONE-DEX 2, nécessitant le PHONE-DEX 2 pour son utilisation
- Diffusion audio aux aides auditives WIDEX EVOKE™ avec connectivité



DIFFUSION DU SON DE LA TÉLÉVISION STABLE ET ESTHÉTIQUE AVEC **TV PLAY™**



reddot award 2018
winner

Les aides auditives **EVOKE™** 2,4 GHz fonctionnent en parfaite unisson avec **TV PLAY™**, la solution de diffusion la plus polyvalente, la plus stable et la plus simple à ce jour.

- La stabilité de diffusion permet aux utilisateurs de se déplacer librement dans la pièce sans manquer une seconde de l'exceptionnel son de la télévision que diffuse **TV PLAY™** en stéréo.
- Une solution de diffusion du son de la télévision élégante et polyvalente, **TV PLAY™** s'intègre parfaitement au décor et peut être placé devant la télévision ou fixé à l'arrière de celle-ci.
- Grâce à son installation intuitive et à son appairage simple, les utilisateurs peuvent aisément personnaliser leur expérience d'écoute avec l'application et profiter de leurs moments télévisés préférés.

Vous pouvez contrôler **TV PLAY™** avec le contrôle à même votre aide auditive, votre commande à distance Widex ou l'application **EVOKE™**.

PERFECTDRY LUX

CARACTÉRISTIQUES

- Cycle de séchage et de désinfection de 45 minutes
- Déshumidificateur électronique de petite taille et portable pour tous les appareils auditifs Widex et les embouts
- Utilise la lumière UV le rendant complètement hygiénique et réduisant les risques d'infections



REMOTE LINK

CARACTÉRISTIQUES

- Fonctionne avec l'application **WIDEX REMOTE CARE™** afin de connecter avec les clients à distance
- Peut être utilisé pour l'appareillage, le suivi, le réglage fin et le counseling à distance
- Connecte à toutes les aides auditives Widex avec connectivité



RC-DEX

CARACTÉRISTIQUES

- Commutateur de programmes
- Volume hausse/baisse
- Attache pour porte-clés
- Durée de vie de la batterie: environ 12 mois
- Commutateur de verrouillage



FM+DEX

CARACTÉRISTIQUES

- Un appareil flexible pour la diffusion FM
- Petit et facile à manipuler
- Portée de l'antenne jusqu'à 30 mètres
- 10 heures d'utilisation

